

ISTRUZIONI PER L'USO

AesyBite™


Discover

Sleep bruxism monitor

Per maggiori informazioni, visita:



www.aesyra.com/aesybite/discover

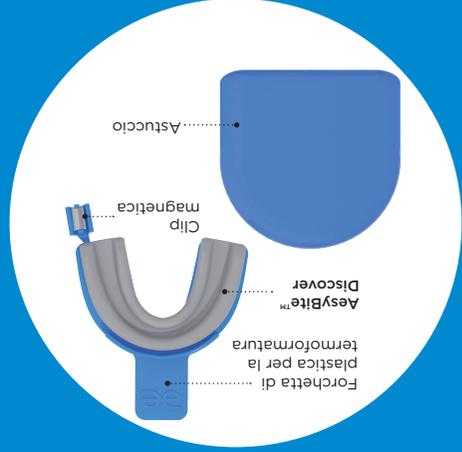

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. AesyBite™ Discover è un dispositivo per uso personale.

INDICAZIONI

- Protegge i denti dall'erosione dovuta al bruxismo, digrignamento e serramento dei denti;
 - Riduce sintomi legati al Bruxismo come malessere dell'articolazione temporo-mandibolare, dolore dei muscoli masticatori and dolori nelle regioni del collo e della testa;
 - Monitora l'attività del bruxismo;
 - Non deve essere modificato, piegato o alterato;
 - Non deve essere perforato o tagliato con oggetti taglienti.
- Non utilizzare in soggetti:**
- Allergici al materiale del bite dentale (EVA Etilene Vinil Acetato-Copolimero);
 - Con meno di 8 denti nell'arcata superiore;
 - Che presentano gengiviti, parodontite o malattie ai denti;
 - Che presentano malocclusioni o anomalie della mandibola;
 - Che impediscono il corretto uso di bite dentali;
 - Con età inferiore a 18 anni.

CONTROINDICAZIONI

Altri possibili effetti collaterali sono:
• Eccesso di salivazione o bocca secca. Normalmente occorrono alcune notti per abituarci. Dopo le prime notti, si potrebbe avere una sensazione di mandibolo durante il giorno senza il bite dentale. Normalmente questa sensazione scompare dopo alcuni giorni di utilizzo. Se questa sensazione persiste smettere di utilizzare AesyBite Discover e consultare un dentista.

Non utilizzare AesyBite™ Discover ulceriforme e consultare il dentista nei seguenti casi:
• Infiammazione o irritazione della cavità orale; Dolore persistente; Aree arrossate in corrispondenza di parti della bocca in contatto con il bite dentale.

Altri possibili effetti collaterali sono:
• Eccesso di salivazione o bocca secca. Normalmente occorrono alcune notti per abituarci. Dopo le prime notti, si potrebbe avere una sensazione di mandibolo durante il giorno senza il bite dentale. Normalmente questa sensazione scompare dopo alcuni giorni di utilizzo. Se questa sensazione persiste smettere di utilizzare AesyBite Discover e consultare un dentista.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

OTTENIMENTO E PRIMO UTILIZZO DELL' APP

1. Scaricare AesyBite™ Discover App dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android);
2. Inserire i propri dati personali nell'App;
3. L'App è pronta per essere utilizzata. Ulteriori informazioni sull'uso di AesyBite™ Discover App possono essere trovate nella sezione guida dell'App.

Inquadra il QR code e ottieni AesyBite™ Discover App.



Dispositivo Medico prodotto da:

Aesyra SA

EPFL Innovation Park, Building C
CH-1015 Lausanne
Switzerland

Supporto

Email:
support@aesyra.com

Telefono:
+39 0282396887
(Estero: +41225481669)



SWISS
MADE



©2020 Aesyra SA - AesyBite™ Discover ver. A.2020-06 ITA

TERMOFORMATURA

(parte per il dentista)

1. Prendere AesyBite™ Discover dal pacchetto sigillato. [Fig. 1];
2. Staccare il magnete dalla forchetta di termoformatura [Fig. 2]. Assicurarsi che il bite sia stabile nella forchetta di termoformatura;
3. Scaldare 600 ml di acqua a 70 gradi. Per questa operazione potete utilizzare un termometro oppure bollire 400 ml di acqua e poi aggiungere 200 ml di acqua a temperatura ambiente;
4. Rimuovere l'acqua dalla fiamma o dal fornello e inserire AesyBite™ Discover completamente in acqua utilizzando la forchetta di termoformatura. Aspettare 2 minuti [Fig. 3];
5. Togliere AesyBite™ Discover dall'acqua, scuoterlo per rimuovere l'eccesso di acqua e immediatamente inserirlo sull'arcata dentale superiore;
6. Inserire in bocca il bite, chiudendo i denti senza stringere troppo. Con le labbra chiuse, inspirare aria ed effettuare una suzione per almeno un minuto, al fine di eliminare l'aria all'interno della bocca [Fig. 4]. Il bite dentale sarà caldo ma non dovrebbe scottare;
7. Controllare che il bite dentale rimanga alloggiato correttamente sull'arcata dentale. Ripetere la procedura una seconda volta se il bite non rimane stabile sull'arcata dentale.

PREPARAZIONE PER L'USO NOTTURNO

(parte per l'utente)

1. Assicurarsi che NFC (Near Field Communication) sia abilitato sul proprio telefono. Aprire l'applicazione AesyBite™ Discover App e premere col dito sull'area di sincronizzazione dello schermo;
2. Prendere AesyBite™ Discover dal suo astuccio;
3. Portare il bite dentale AesyBite Discover in prossimità (circa 1 cm) del lato posteriore del telefono [Fig. 5];
4. L'App notificherà che la sincronizzazione è completata. Da questo momento il bite dentale è pronto per l'uso e per il monitoraggio dell'attività di bruxismo;
5. Pulire il bite con acqua fredda;
6. Indossare AesyBite™ Discover e andare a dormire.

OTTENERE I DATI DOPO L'USO

1. Pulire il bite dentale con acqua fredda dopo l'uso;
2. Assicurarsi che NFC sia abilitato sul proprio telefono;
3. Aprire l'applicazione AesyBite™ Discover App e premere col dito sull'area di sincronizzazione dello schermo;
4. Portare il bite dentale AesyBite™ Discover in prossimità (circa 1 cm) del lato posteriore del telefono [Fig. 5];
5. L'App notificherà che la sincronizzazione è completata. I dati appariranno sullo schermo;
6. Riporre AesyBite™ Discover nel suo astuccio.

MANUTENZIONE

- Tieni il bite dentale AesyBite™ Discover pulito lavandolo con acqua fredda prima e dopo ogni utilizzo;
- Quando non in uso, tieni il bite dentale nel suo astuccio.

